

**ПРОСТОТА, КОЯТО ВИ
ВОДИ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО**

**МАКСИМАЛНА ОБРАБОТВАЕМОСТ,
ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ,
МИНИМАЛНИ УСИЛИЯ.**


ESTELITE ASTERIA

Един жест за съвършенство

С Estelite Asteria постигането на директни и индиректни възстановявания с безупречна естетика никога не е било по-лесно. Благодарение на своята усъвършенствана технология, този композит позволява интуитивно и опростено наслагване, намалявайки работното време без компромис с качеството. **Максимална обработваемост, отлични резултати, минимални усилия.** Защото съвършенството идва от простотата.



ESTELITE ASTERIA
20.000X

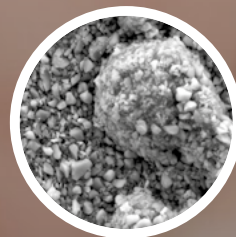

CERAM.X SPHERETEC
ONE UNIVERSAL* 5.000X

* Не е регистрирана търговска марка
Tokuyama Dental Corporation

Estelite Asteria Essential Kit



7 шприци Estelite Asteria
4,0 g (цветове: A1B,
A2B, A3B, A3.5B, A4B,
NE, OCE) + клинично
ръководство

Допълнително: 1 шприца
• Estelite Asteria, 4,0 g, 15
компюли (PLT), 0,20 g всяка.
• Ръководство за нюанси
Estelite Asteria

Цветове:
Body Enamel:
• A1B, A2B, A3B, A3.5B,
A4B, B3B, BL
Colored Enamel:
• NE, WE, YE, TE, OCE

Цветовият гайд предоставя възможност за създаване и персонализиране на цветови мостри в съответствие с вашите специфични предпочитания и клинични нужди. Конфигурирайте го индивидуално и създайте прецизни нюанси на композита, отговарящи на вашите изисквания.

ESTELITE ASTERIA

СЕМПЛА ЕСТЕТИКА

Създавайте възстановявания с проста, повторяема и предвидима техника с превъзходни естетични качества.

АНТЕРИОРНИ И
ПОСТЕРИОРНИ
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

КОМПОЗИТНИ ФАСЕТИ

ЗАТВАРЯНЕ НА ДИАСТЕМИ



Естелит Астерия. Лидер на печеливш отбор.

Кой е казал „Никога не сменяй печелившия отбор“? Когато основите са стабилни, отборът е готов да посрещне и предложи големи промени. Консервативната линия на Tokuyama Dental е печеливш отбор, с изключителен капитан: Estelite Asteria. Поради тази причина да изберете Токуяма, означава да живеете и да споделяте всеки ден големи успехи. Това е нашата философия. Tokuyama Dental: екип, който печели, се развива.



Опростено наслявяване


Estelite Asteria представя нова концепция за улеснена двуфазна стратификация. Тази техника позволява постигането на изключително естетичен резултат само с две маси, както във

фронталния, така и в дисталния сектор. Body масите възпроизвеждат нюанса и хромата, докато Enamel масите позволяват точно възстановяване на стойността (value).



IV клас

Post-op резултат

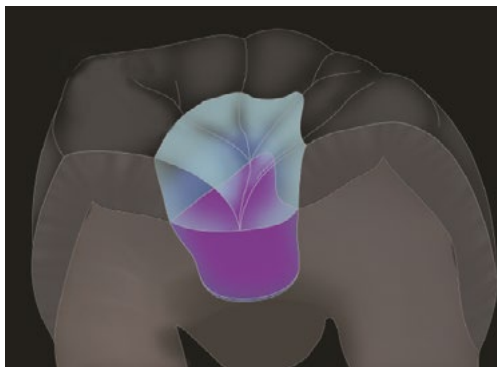

IV клас



Post-op резултат

Клинични случаи с любезното съдействие на Dr. Noboru Takahashi

ПОВТОРНО ПРИКРЕПВАНЕ НА ФРАГМЕНТА ПРИ МЛАД ПАЦИЕНТ



Клинични изображения с любезното съдействие на проф. S. Grandini и д-р G. Pavolucci (University of Siena)


Sol-Gel технология




Методът, патентован от Токуяата за създаването на Supra Nano Spherical пълнителя, позволява контрол върху размера на пълнителните частици чрез управление на времето на реакцията, както и модулиране на рефракционния индекс чрез промяна на типа и гранулометрията на добавките. Резултатът? Приятна обработваемост, перфектно съвпадение на цвета, лесна и ефективна полируемост – за доволни пациенти във времето!

Supra Nano сферични частици пълнител при 50 000 увеличение

Износване

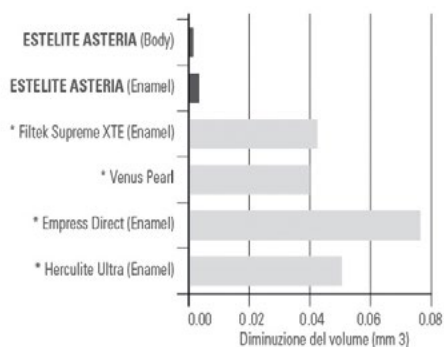

Абразия на зъба антагонист

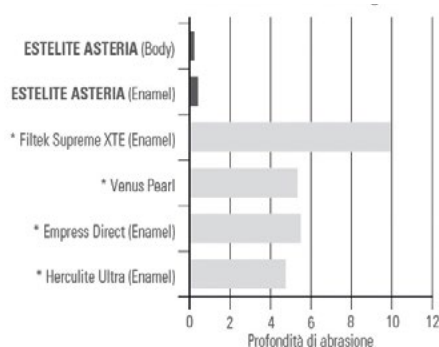


*Not a registered trademark of Tokuyama Dental - Source: Tokuyama Dental R&D
Източник: Tokuyama Dental R&D

Лесен за постигане, дълготраен блясък

Сферичният пълнител ESTELITE ASTERIA Supra-Nano гарантира изключително гладка, равномер-

на и блестяща повърхност, която издържа във времето.

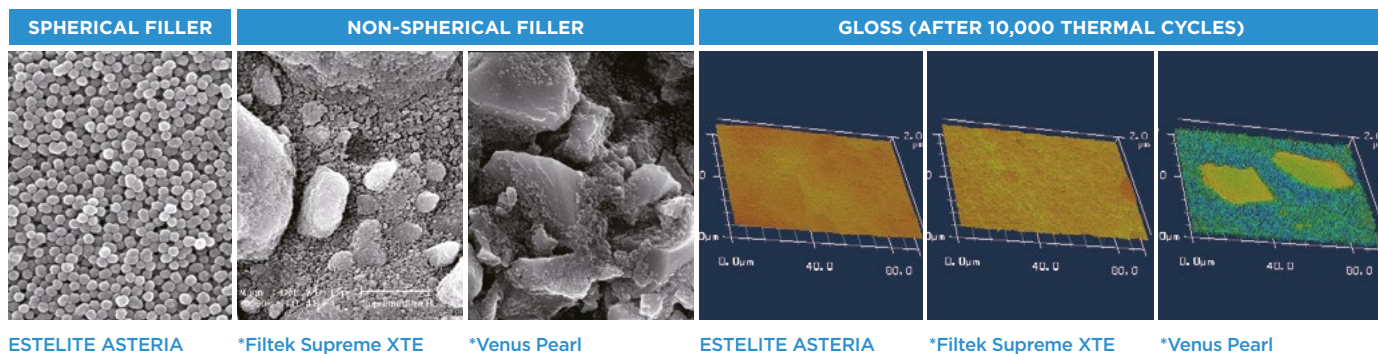

*Not a registered trademark of Tokuyama Dental - Source: Tokuyama Dental R&D

ДИРЕКТНО ЕСТЕТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ВЪВ ФРОНТАЛНИЯ СЕКТОР




Клинични изображения с любезното съдействие на Dr. Leandro Pereira (Brazil)

Невидими полета

7 нюанса Body (гентин) и 5 нюанса Enamel покриват цялата цвятова гама и нюанси на естествения зъб. За да се постигне невидим преход, ръбът се покрива с Body маси (с изключение на инцизалната зона), които благодарение на усъвършен-

стваните си оптични свойства осигуряват отлично маскиране дори при тънки ръбове. Enamel масите притежават такава степен на прозрачност, че позволяват възпроизвеждането на ефекти, наподобяващи естествения емайл.


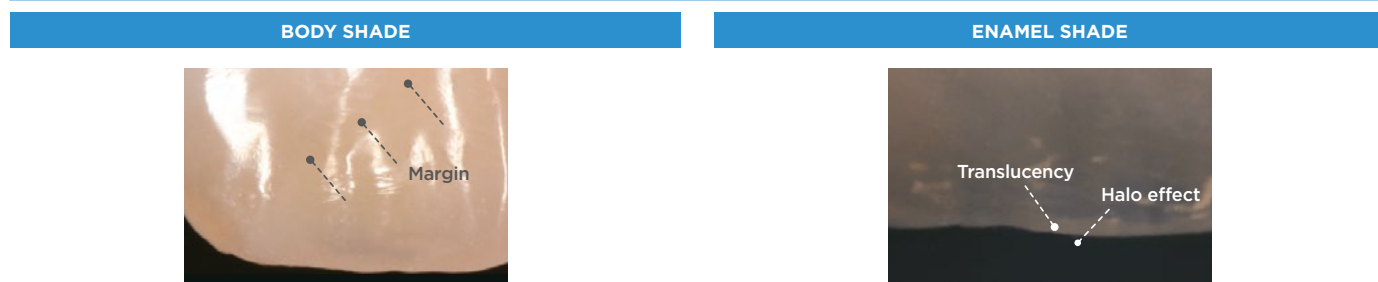


Клиничен случай с любезното съдействие на Dr. Noboru Takahashi

Body нюансите се адаптират перфектно към ръба на препарирания участък. Те осигуряват балансирана непрозрачност, без необходимост от използване на опакери или гентинови маси. Цветовете A1B-A4B се хармонизират с повечето естествени гентинции. Допълнителните цвятове BL и B3B са предназначени съответно за много бели зъби (BL) и за зъби с жълтеникав B-нюанс (B3B).


Клиничен случай с любезното съдействие на Dr. Noboru Takahashi

Емайлите нюанси имат прозрачност, сравнима с естествения емайл на зъбите. Масата NE намира основното си приложение в предните участъци, докато OcE е особено подходяща за оклузалната част на задните зъби. TE е предназначена за особено прозрачни предни зъби, WE за бели емайлви нюанси, а YE за депигментирани оранжеви емайлви нюанси.

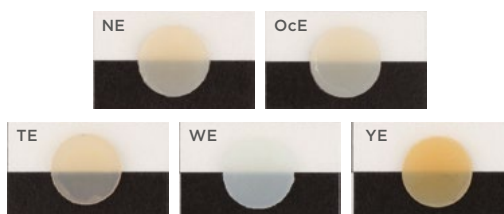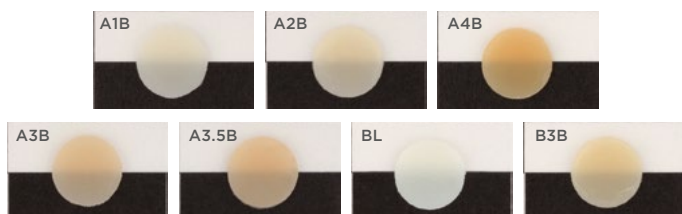


Представяне

Знаете ли, че при оценка на композитните материали е по-важно съдържанието на пълнеж да се измерва по обем, а не по тегло?

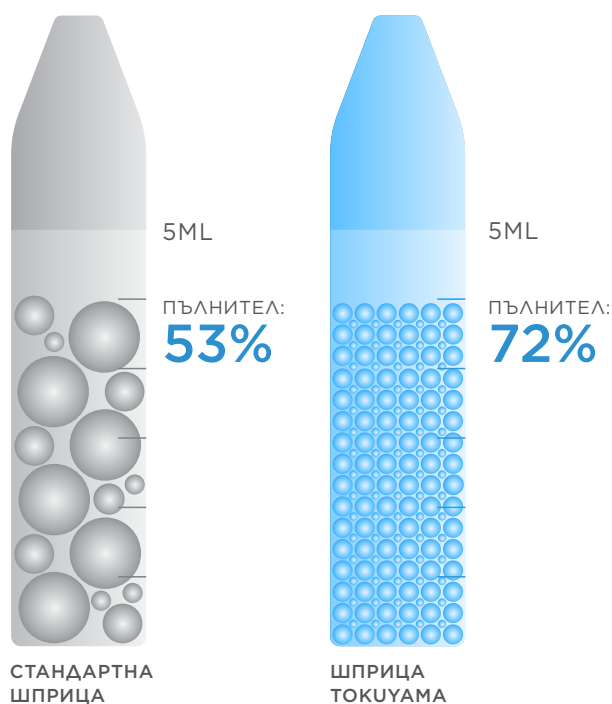

Как точно измервате количеството продукт, който закупвате? Най-точната единица за измерване е милилитри (ml).

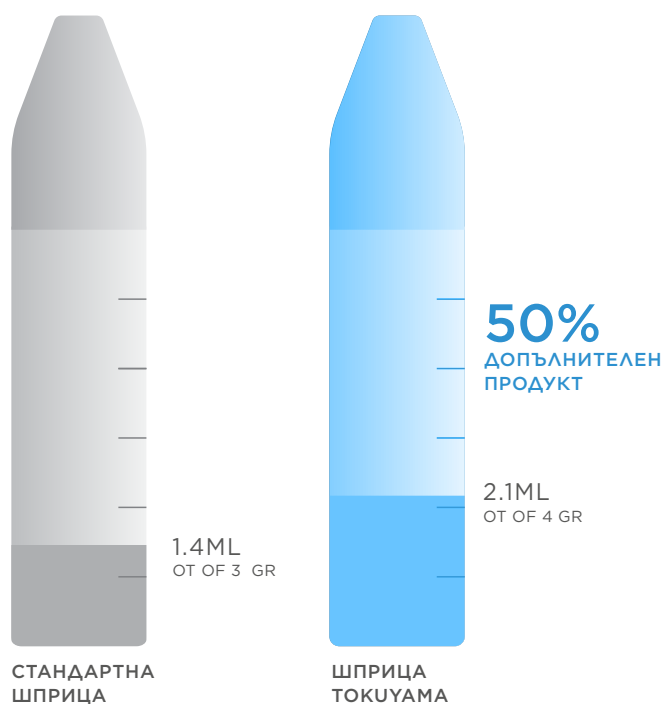

Съвети и трикове

- Ако повърхностната трансlucentност е висока, може да е необходим тънък слой **NE**, нанесен върху слоя Body. Важно е масата Body да покрива изцяло ръба на естествения емайл още в първия нанесен слой, за да се осигури оптимално прикриване на границата на препариране.
- **NE (Neutral Enamel)** се препоръчва в повечето случаи за възстановяване на степенята на translucentност в инцизалната зона. Ако желаете да намалите яркостта (value) или да отслабите хромата, можете да използвате **ОсЕ (Occlusal Enamel)**. Емайлите маси трябва да се нанасят на тънки слоеве и основно по инцизалния ръб (пог 0,5 mm).
- **WE (White Enamel)** се препоръчва за възстановяване на интерпроксималните стени. **WE** също така е подходяща алтернатива на **NE** при светли нюанси. **TE (Transparent Enamel)** е най-трансlucentната маса в системата Asteria. Използва се като междинен слой между Body и Enamel масите с цел подчертаване на инцизалната translucentност.
- **YE (Yellow Enamel)** е създадена за възпроизвеждане на оцветявания в емайла, докато **ОсЕ (Occlusal Enamel)** е предназначена за възстановявания върху диатрични зъби, с пластичност, специално разработена за оформяне на туберкули и фисури. Освен това, ОсЕ притежава отлично междинно значение между NE и WE.