


SIMPLITATEA CARE TE DUCE LA PERFEȚIUNE

PRODUCTIVITATE MAXIMĂ,
REZULTATE EXCELENTE,
EFORT MINIM.


ESTELITE ASTERIA

Un singur gest pentru perfecțiune

Cu Estelite Asteria, realizarea de restaurări directe și indirecte cu o estetică impecabilă nu a fost niciodată mai ușoară. Datorită tehnologiei sale avansate, acest compozit permite stratificarea intuitivă și simplificată, reducând timpul de lucru fără a compromite calitatea. **Productivitate maximă, rezultate excelente, efort minim.** Pentru că perfecțiunea vine din simplitate.

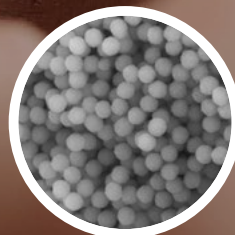

ESTELITE ASTERIA
20.000X

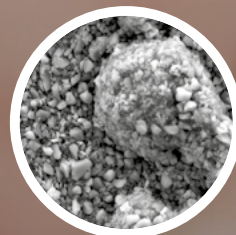

CERAM.X SPHERETEC
ONE UNIVERSAL* 5.000X

* Nu este o marcă înregistrată
Tokuyama Dental Corporation

Ambalaj disponibil

Estelite Asteria

Trusă esențială



7 seringi Estelite Asteria
4.0g (culori: A1B, A2B,
A3B, A3.5B, A4B, NE,
OCE) + Ghid clinic

Piese de schimb:

- 1 seringă Estelite Asteria, 4,0 g
- 15 capsule (PLT), 0,20 g fiecare
- Ghid de nuanțe personalizate Estelite Asteria

Culori:

- Masa Body : A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B3B, BL Masă
- Smalt: NE, WE, YE, TE, OcE

Ghidul de culoare vă permite să creați și să personalizați eșantionul pentru luarea culorii în funcție de preferințele și nevoile dumneavoastră specifice. Personalizați ghidul de culori și creați nuanțele compozite exacte după cum doriți.

ESTELITE ASTERIA

PUR ȘI SIMPLU
ESTETIC

Creați restaurări cu o tehnică simplă, repetabilă și previzibilă, cu calități estetice superioare.

RESTAURĂRI ANTERIOARE
ȘI POSTERIOARE

FAȚETE DIN COMPOZIT

ÎNCHIDEREA DIASTEMELOR



Estelite Asteria. Liderul unei echipe câștigătoare.

Cine a spus „Nu schimba niciodată o echipă câștigătoare”? Dacă fundamentele sunt puternice, o echipă este pregătită să primească și să propună schimbări mari. Linia de compozite Tokuyama Dental este o echipă câștigătoare, cu un mare căpitan: Estelite Asteria. Din acest motiv, a alege Tokuyama înseamnă a trăi și a împărtăși în fiecare zi mari succese. Aceasta este filozofia noastră. Tokuyama Dental: echipă care câștigă, evoluează.




Stratificare simplificată

Estelite Asteria introduce un nou concept de stratificare simplificată în două faze. Această tehnică vă permite să obțineți un rezultat extrem de estetic cu doar două mase, atât în sectorul anterior, cât și

în cel posterior. Masele de Body reproduc croma și nuanța, în timp ce masele de Smalt vă permit să reproduceți valoarea.



Clasa IV Rezultat postoperator

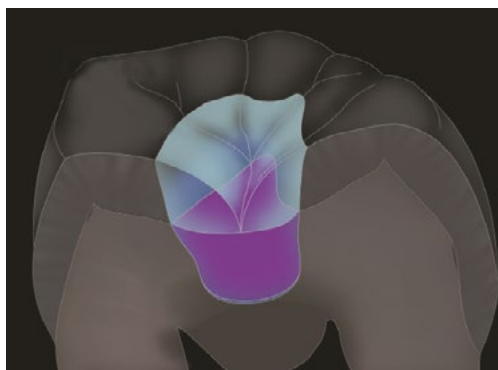

Clasa I



Rezultat postoperator

Cazuri clinice prin amabilitatea Dr. Noboru Takahashi

REATAȘAREA FRAGMENTULUI LA UN PACIENT TÂNĂR



Imagini clinice oferite de Prof. S. Grandini și Dr. G. Pavolucci (Universitatea din Siena)


Tehnologia Sol-Gel




Metoda, patentată de Tokuyama pentru umplutura Supra Nano Spherical, permite controlul dimensiunii particulelor de umplură acționând asupra timpilor de reacție și modularea indicelui de refracție al umplurii, modificând tipul și granulometria aditivului. Rezultatul? Manevrabilitate plăcută, potrivirea perfectă a culorilor, lustruire simplă și eficientă pentru pacienți mulțumiți în timp!

Particule de umplură Supra Nano sferice la o mărire de 50.000

Rezistență

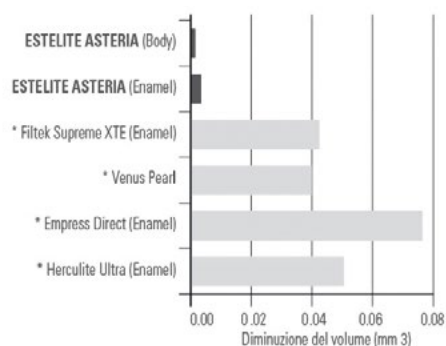

Abraziunea dintelui antagonist

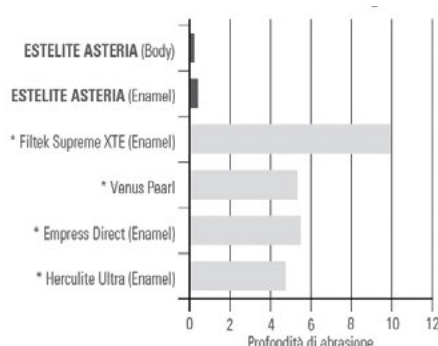


* Nu este o marcă înregistrată
Tokuyama Dental Corporation
Sursa: Tokuyama Dental R&D

Ușor de obținut, strălucire de lungă durată

Umplutura sferică ESTELITE ASTERIA Supra-Nano garantează o suprafață extrem de netedă, uniformă

și stralucitoare care rezistă în timp.

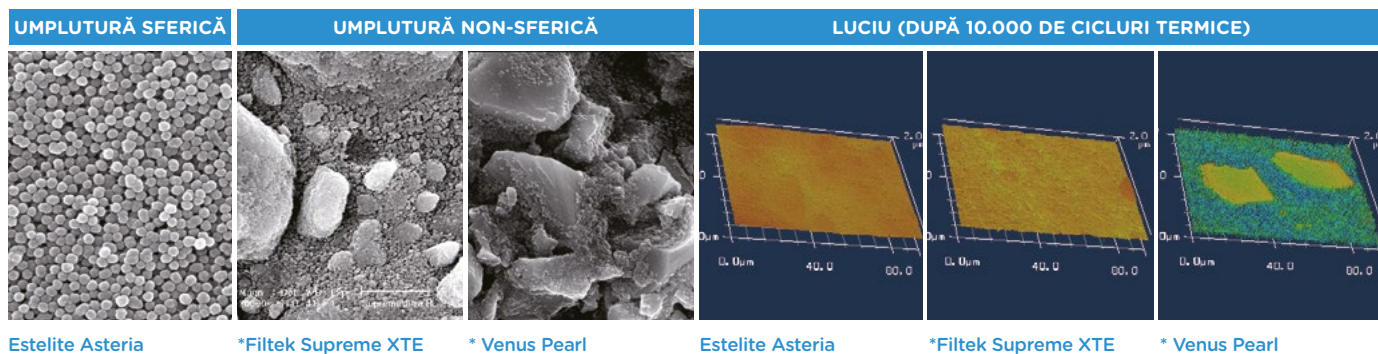

*Nu este o marcă înregistrată Tokuyama Dental - Sursa: Tokuyama Dental R&D

RESTAURARE ESTETICĂ DIRECTĂ ÎN SECTORUL FRONTAL




Imagini clinice prin amabilitatea Dr. Leandro Pereira (Brazilia)

Margini invizibile

7 nuanțe de Body (Dentină) și 5 nuanțe de Smalt acoperă întreaga gamă de culori și nuanțe ale dintelui natural. Pentru a obține o margine invizibilă, acesta este acoperit cu mase de Body (cu excepția zonei incizale)

care, datorită proprietăților lor optice avansate, asigură un camuflaj excelent chiar și pentru marginile înguste. Masele de smalt au o astfel de transparență încât este posibil să se obțină efecte similare smaltului natural.


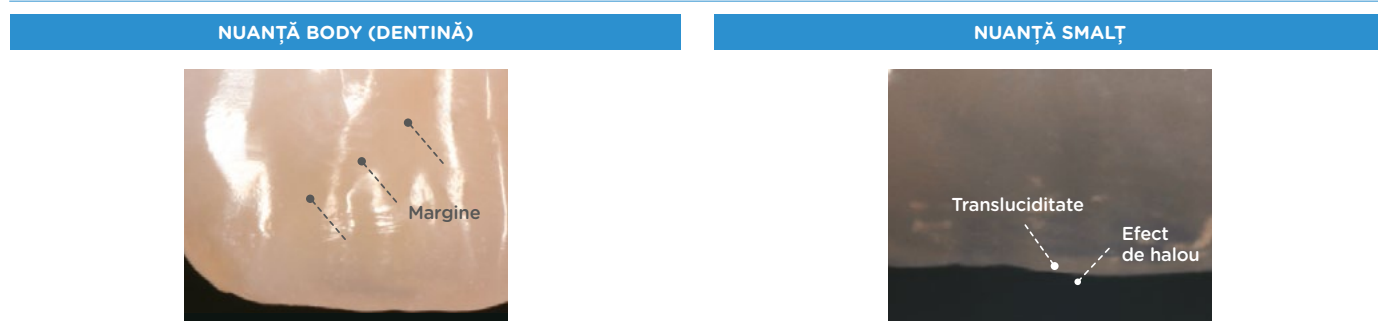


Caz clinic prin amabilitatea Dr. Noboru Takahashi

Nuanțele de Body se adaptează perfect la prepararea marginală. Pot să asigure o opacitate echilibrată, fără a fi nevoie să se recurgă la utilizarea de culori opace sau dentine. Culorile A1B-A4B se armonizează cu majoritatea dentițiilor naturale. Culorile suplimentare BL și B3B sunt indicate pentru dinții foarte albi (BL) și respectiv, dinții de nuanță B gălbui (B3B).


Caz clinic prin amabilitatea Dr. Noboru Takahashi

Nuanțele de smalt au o transparență comparabilă cu cea a smaltului natural al dinților. Masa NE își găsește utilizarea principală în sectoarele anterioare, în timp ce OcE este deosebit de potrivită pentru zona ocluzală a dinților posteriori. TE este dedicat dinților anteriori deosebit de translucizi, WE pentru smalt albicios și YE pentru smalt portocaliu depigmentat.

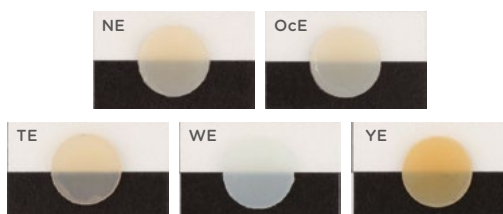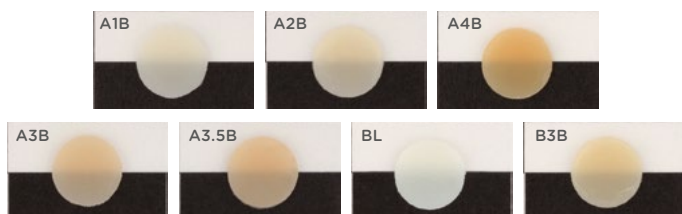


Performanță

Știați că este mai important să măsurați cantitatea de umplutură în funcție de volum și nu în funcție de greutate?

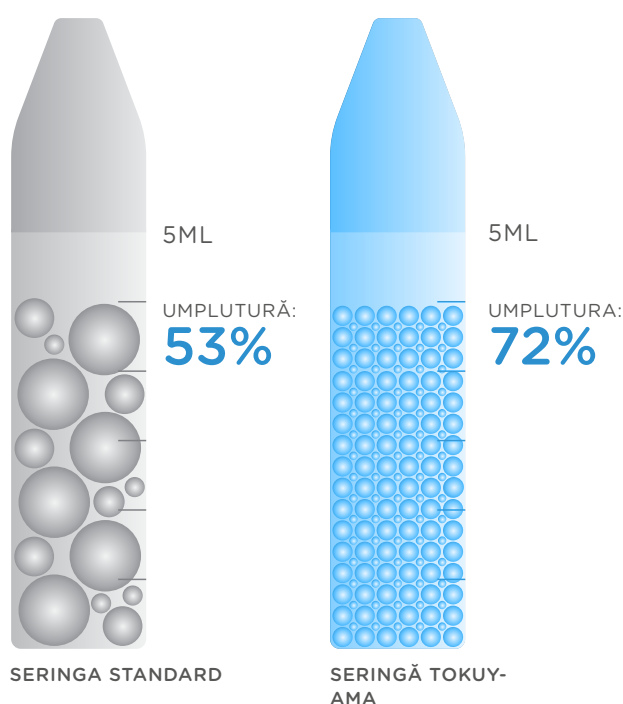

Cum măsurați cantitatea reală de produs pe care îl cumpărați? Unitatea de măsură corectă este ml.

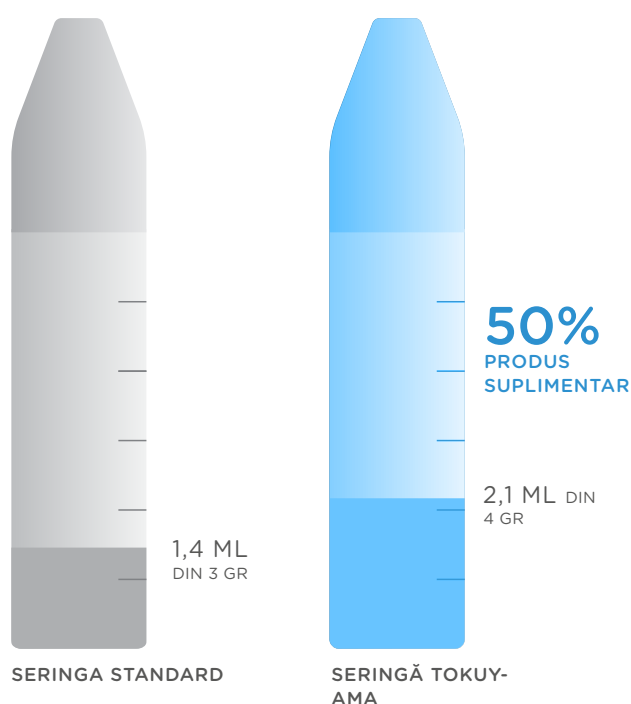

Tips and tricks

- Dacă translucidența suprafeței este mare, poate fi necesar un strat subțire de **NE** aplicat peste stratul Body. Este important ca masa Body să acopere întreaga margine a smalțului natural în primul strat aplicat pentru a masca cel mai bine marginea preparatului.
- **NE (smalț neutru)** se recomandă în majoritatea cazurilor pentru refacerea gradului de translucidență în zona incizală. Dacă doriți să reduceți valoarea sau să desaturați croma, puteți utiliza **OcE (smalț ocluzal)**. Smalțul trebuie aplicat în straturi subțiri și în principal pe marginea incizală (sub 0,5 mm).
- **WE (smalț alb)** se recomandă pentru reconstrucția pereților interproximali. **WE** este recomandat ca alternativă la **NE** în nuanțe deschise. **TE (Smalțul Transparent)** este cea mai translucidă masă din sistemul Asteria. Este indicat ca strat intermediar între bază și smalț pentru a spori transluzența incizală.
- **YE (smalț galben)** conceput pentru a reproduce decolorările smalțului, în timp ce smalțul ocluzal **OcE** este proiectat pentru reconstrucții pe dinții distopici, cu sculptabilitate conceput special pentru cuspizi și șanțuri. În plus, OcE are o valoare intermediară excelentă între NE și WE.