

EFICIENȚĂ AUTOMATĂ


VITEZĂ, PRECIZIE,
FIABILITATE ÎN
FIECARE APLICAȚIE.

ESTELITE Σ QUICK


**Libertate maximă de modelare,
timp minim de polimerizare.**

Cu Estelite Sigma Quick, realizarea restaurărilor estetice și durabile este rapidă și ușoară. Datorită tehnologiei sale inovatoare, acest compozit oferă o manevrabilitate superioară și o strălucire de lungă durată, reducând timpul fără a compromite calitatea.

Eficiența pe care te poți baza.

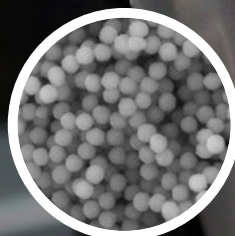

ESTELITE SIGMA
20.000X

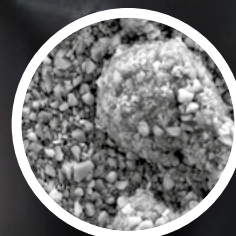

CERAM.X SPHERETEC
ONE UNIVERSAL* 5.000X

* Nu este o marcă înregistrată
Tokuyama Dental Corporation

ESTELITE Σ QUICK

Zâmbete
autentice,
întotdeauna





Caracteristici

- Timp de întărire ultra-rapid 3 secunde cu lampă cu plasmă (maximum 2 mm grosime)
- Timp de lucru prelungit 90 de secunde într-un mediu cu lumină de 10.000 lx
- Ușor de lustruit
- Strălucire de lungă durată
- Efect cameleonic adevărat
- Rezistență ridicată la abraziune
- Con tracție de polimerizare extrem de scăzută (1,3%)
- Radioopac
- Restaurări anterioare și posterioare
- Închiderea diastemelor
- Mascarea decolorărilor
- Fațete din compozit
- Cimentarea restaurărilor indirecte
- Caracterizări și personalizări de culoare pentru restaurări directe și indirecte pe bază de rășină

Dr.
Bilal Yaşa



Dr.
Nicolò Barbera

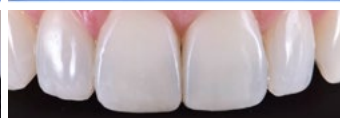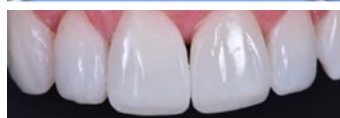

Tehnologie de top de mai
bine de 10 ani.

DA
DENTAL
ADVISOR



2010 / 2024 TOP AWARD COMPOZIT



Ambalaj disponibil

Estelite Sigma Quick Kit de introducere

- 6 seringi Estelite Sigma Quick 3,8 g (culori: A1, A2, A3, A3.5, OA2, OPA2)
- 1 Flacon Bond Force II 1ml și 50 de aplicatoare
- 1 godeu de amestecare Ghid de culori



Estelite Sigma Quick 3 Kit de seringi

- 3 seringi Estelite Sigma Quick 3,8 g (culori: A2, A3, OA3)

Piese de schimb

- 1 seringă Estelite Sigma Quick 3,8 g
20 capsule (PLT) Estelite Sigma Quick, 0,20 g
- Ghid rapid de nuanțe Estelite Sigma

Clasificarea culorilor

- Smalțuri



- Bază



- Mase de efect



- Dentine



Tips and tricks

Utilizați OPA2 în clasele III și IV ca prim strat.


Știați că OPA2 poate fi folosit și cu Estelite Asteria?

Metoda Sol-Gel


DIN 1981

Umplutură sferică
cu dimensiune
Supra-Nano,
utilizare simplă,
rezultate
extraordinare de
lungă durată.

COPIEREA ESTE UȘOARĂ,
INOVAȚIE TOKUYAMA.

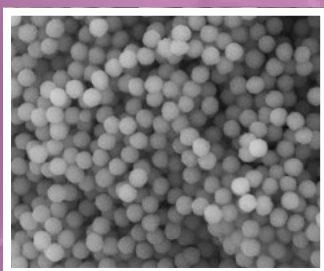

ESTELITE SIGMA QUICK
20.000X

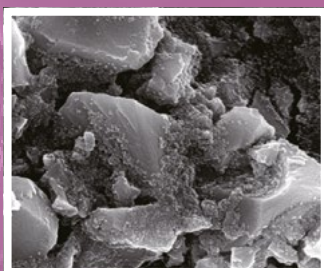

GAENIAL «GC»*
20.000X

* Nu este o marcă
înregistrată Tokuyama
Dental Corporation

Tokuyama, datorită metodei brevetate Sol-Gel, este capabilă să determine în laborator forma și dimensiunea umpluturii sale pe bază de SiO_2 și ZrO_2 (siliciu și oxid de zirconiu), rezultând o umplutură cu adevărat sferică numită Supra Nano Spherical Filler.

Este un compus obținut datorită unei reacții chimice a alcaloizilor metalici. Datorită acestei metode, dimensiunile moleculare Supra-Nano conferă materialului caracteristici care permit restaurări cu suprafețe foarte netede și strălucire finală maximă.



UN BREVET EXCLUSIV
TOKUYAMA DENTAL DIN 1981.

 **Tokuyama**
Innovating Tomorrow's Dentistry, Today.

Tokuyama Dental Italy srl
tel. +39 0444 659650
fax +39 0444 750345
info@tokuyama.it

 **sitea**

SITEA România SRL
tel. +4021 528 03 20
tel. +4021 528 03 21
office@sitea.ro



www.tokuyama.it

DPSQR001