

EFFICACITÉ AUTOMATIQUE


RAPIDITÉ,
PRÉCISION,
FIABILITÉ
DANS CHAQUE
APPLICATION.

ESTELITE Σ QUICK


**Liberté de modélisation maximale,
temps de polymérisation minimal.**

Avec Estelite Sigma Quick, obtenir des restaurations esthétiques et durables est simple et rapide. Grâce à sa technologie innovante, ce composite offre une maniabilité supérieure et une brillance durable, réduisant les temps sans compromettre la qualité.

Une efficacité sur laquelle vous pouvez compter.

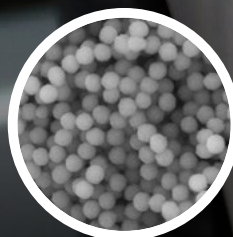

ESTELITE SIGMA
20,000X

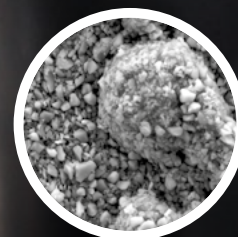

CERAM.X SPHERETEC ONE
UNIVERSAL* 5,000X

* Ce n'est pas une marque déposée
Tokuyama Dental Corporation

ESTELITE Σ QUICK

Des sourires
authentiques,
toujours






Caractéristiques

- Temps de polymérisation ultra-rapide
3 secondes avec lampe plasma (épaisseur maximum 2 mm)
- Temps de travail prolongé
90 secondes dans un environnement lumineux de 10 000 lx
- Facile à polir
- Une brillance durable
- Véritable effet caméléon
- Haute résistance à l'abrasion
- Retrait de polymérisation extrêmement faible (1,3 %)
- Radio-opaque
- Restaurations antérieures et postérieures
- Fermeture des diastèmes
- Masquage des décolorations
- Facette en composite
- Scellement de restaurations indirectes
- Caractérisations et personnalisations de couleurs pour restaurations directes et indirectes à base de résine

Dr. Bilal
Yaşa



Dr. Nicolò
Barbera

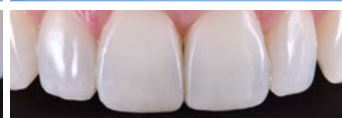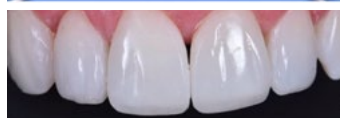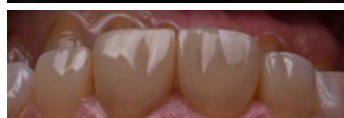

Technologie gagnante
depuis plus de 10 ans.

DA
DENTAL
ADVISOR



2010 / 2024 TOP AWARD COMPOSITE



Conditionnements disponibles

Estelite Sigma Quick Kit d'introduction

- 6 seringues Estelite Sigma Quick 3,8 g (couleurs : A1, A2, A3, A3,5, OA2, OPA2)
- 1 flacon Bond Force II 1 ml 50 applicateurs
- 1 godet mélangeur pour le guide des teintes



Estelite Sigma Quick 3 Kit de seringues

- 3 seringues Estelite Sigma Quick 3,8 g (couleurs : A2, A3, OA3)

Pièces de rechange

- 1 seringue Estelite Sigma Quick 3,8 g 20 capsules (PLT)
- Estelite Sigma Quick 0,20 g Guide des teintes Estelite Sigma Quick

Classification des teintes

- Émaux



- Body



- Masses pour effets



- Dentine



Trucs et astuces

Utilisez OPA2 dans les classes III et IV comme première couche.


Saviez-vous que OPA2 peut également être utilisé avec Estelite Asteria ?

Méthode Sol-Gel


DEPUIS 1981

La charge sphérique de taille Supra-Nano pour des résultats simples, durables et très esthétiques.

COPIER EST FACILE,
INNOVER C'EST TOKUYAMA.

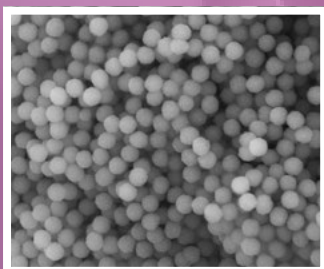

ESTELITE SIGMA QUICK
20.000X

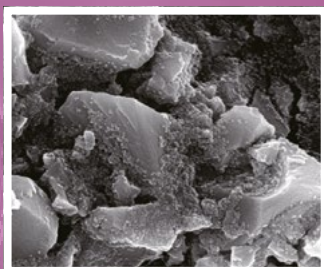

GÆNIAL «GC»*
20.000X

* Il ne s'agit pas d'une
marque déposée de
Tokuyama Dental
Corporation

Tokuyama, grâce à la méthode brevetée Sol-Gel, est capable de déterminer la forme et la taille de ses charges à base de SiO_2 et ZrO_2 (oxyde de silice et de zirconium) en laboratoire, ce qui a donné naissance à une charge véritablement sphérique appelée Supra Nano Spherical Filler.

Il s'agit d'un composite obtenu par une réaction chimique d'alcoxydes métalliques. Grâce à cette méthode, les dimensions moléculaires Supra-Nano confèrent au matériau des caractéristiques qui permettent des restaurations avec des surfaces très lisses et une brillance finale maximale.



UN BREVET EXCLUSIF
TOKUYAMA DENTAL DEPUIS 1981

 **Tokuyama**
Innovating Tomorrow's Dentistry, Today.

Tokuyama Dental Italy srl
tel. +39 0444 659650
fax +39 0444 750345
info@tokuyama.it



LABORATOIRES PRED
tél. +33 14 19 83 400
info@pred.fr
www.pred.fr



www.tokuyama.it