

EFICIENCIA AUTOMÁTICA


VELOCIDAD,
PRECISIÓN
Y FIABILIDAD
EN CADA
APLICACIÓN.

ESTELITE Σ QUICK


**Máxima libertad de modelado,
mínimo tiempo de polimerización.**

Con Estelite Sigma Quick, lograr restauraciones estéticas y duraderas es rápido y fácil. Gracias a su innovadora tecnología, este composite ofrece una trabajabilidad superior y un brillo duradero, reduciendo tiempos sin comprometer la calidad.

Eficiencia en la que puedes confiar.

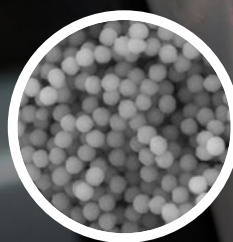

ESTELITE SIGMA
20.000X

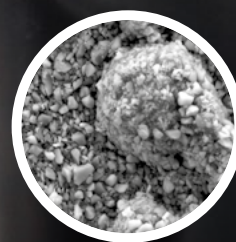

CERAM.X SPHERETEC ONE
UNIVERSAL* 5.000X

* No es una marca registrada
Tokuyama Dental Corporation

ESTELITE Σ QUICK


Sonrisas
auténticas,
siempre




Características

- Tiempo de curado ultrarrápido
3 segundos con lámpara
de plasma (máximo 2 mm de
espesor)
- Tiempo de trabajabilidad
extendido
90 segundos en un entorno
de luz de 10.000 lx
- Fácil de pulir
- Brillo que perdura
- Auténtico efecto camaleón
- Alta resistencia a la abrasión
- Contracción de polimerización
extremadamente baja (1,3 %)
- Radiopaco
- Restauraciones anteriores
y posteriores
- Cierre de diastemas
- Enmascaramiento
de decoloraciones
- Carillas en composite
- Cementación de restauraciones
indirectas
- Caracterizaciones y
personalizaciones de color para
restauraciones directas
e indirectas en resina

Dr.
Bilal Yaşa

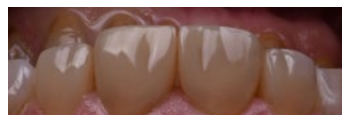

Dr.
Nicolò Barbera

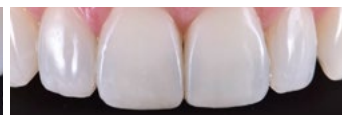

La tecnología ganadora
desde hace más de 10 años.

DA
DENTAL
ADVISOR



2010 / 2024 TOP AWARD COMPOSITE



Envases disponible

Estelite Sigma Quick Intro Kit

- 6 jeringas Estelite Sigma Quick de 3,8 g (colores: A1, A2, A3, A3.5, OA2, OPA2)
- 1 botella de Bond Force II de 1 ml 50 aplicadores
- 1 copa de mezclado Shade Guide



Estelite Sigma Quick 3 Kit de jeringas

- 3 jeringas Estelite Sigma Quick de 3,8 g (colores: A2, A3, OA3)



Piezas de repuesto

- 1 jeringa Estelite Sigma Quick de 3,8 g
- 20 cápsulas (PLT) Estelite Sigma Quick 0,20 g
- Estelite Sigma QuickShade Guide

Clasificación de colores

- Esmaltes



- Body



- Efecto masivo



- Dentinas



Consejos y trucos

Utiliza OPA2 en las clases III y IV como primera capa.


¿Sabías que OPA2 también se puede utilizar con Estelite Asteria?

Método Sol-Gel


DESDE 1981

El relleno esférico de tamaño Supra-Nano para resultados simples, duraderos y maravillosos.

COPIAR ES FÁCIL, INNOVAR ES TOKUYAMA.

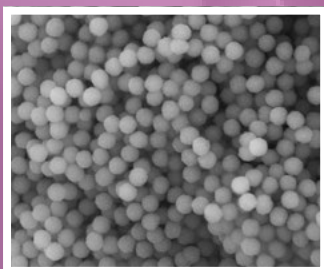

ESTELITE
SIGMA QUICK
20.000X

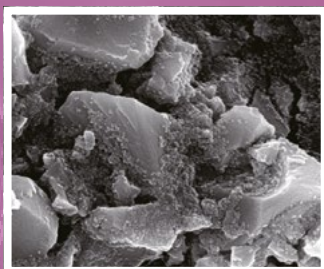

GAENIAL «GC»*
20.000X

* No es una marca registrada de Tokuyama Dental Corporation

Tokuyama, gracias al método Sol-Gel patentado, puede determinar en el laboratorio la forma y el tamaño de sus rellenos basados en SiO_2 y ZrO_2 (sílice y óxido de circonio), dando como resultado un relleno verdaderamente esférico llamado Supra Nano Spherical Filler.

Es un compuesto obtenido a través de una reacción química de alcóxidos metálicos. Gracias a este método, las dimensiones moleculares Supra-Nano confieren al material características que permiten realizar restauraciones con superficies muy lisas y máximo brillo final.



UNA PATENTE EXCLUSIVA
TOKUYAMA DENTAL DESDE 1981

Tokuyama
Innovating Tomorrow's Dentistry, Today.

TOKUYAMA DENTAL ESPAÑA
Tel. 900 800 840 — Tel. 868 187 961
info@tokuyama.es
www.tokuyama.es

proclinic

Distribuidor exclusivo
tel. 900 393 939
proclinic@proclinic.es



www.tokuyama.es

DPSQES01