

**EFFICIENZA
AUTOMATICA**

**RAPIDITÀ,
PRECISIONE,
AFFIDABILITÀ
IN OGNI
APPLICAZIONE.**


**ESTELITE
Σ QUICK**

**Massima libertà di modellazione,
minimo tempo di polimerizzazione.**

Con Estelite Sigma Quick, ottenere restauri estetici e durevoli è semplice e veloce. Grazie alla sua tecnologia innovativa, questo composito offre una lavorabilità superiore e una brillantezza duratura, riducendo i tempi senza compromessi sulla qualità. **L'efficienza su cui puoi contare.**



ESTELITE ASTERIA
20.000X

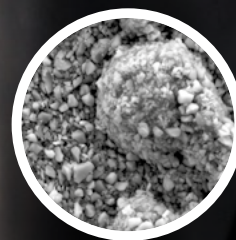

CERAM.X SPHERETEC
ONE UNIVERSAL* 5.000X

ESTELITE Σ QUICK

Sorrisi
autentici,
da sempre




Caratteristiche

- Tempo di polimerizzazione ultra-rapido
3 secondi con lampada al plasma (massimo 2 mm di spessore)
- Tempo di lavorabilità esteso
90 secondi in ambiente luminoso 10.000 lx
- Facile da lucidare
- Lucentezza che dura
- Effetto camaleontico vero
- Resistenza all'abrasione elevata
- Contrazione da polimerizzazione estremamente bassa (1,3%)
- Radiopaco
- Restauri anteriori e posteriori
- Chiusura di diastemi
- Mascheramento di decolorazioni
- Veneer in composito
- Cementazione di restauri indiretti
- Caratterizzazioni e personalizzazioni del colore per restauri diretti e indiretti a base di resina

Dr.
Bilal
Yaşa



Dr.
Nicolò
Barbera

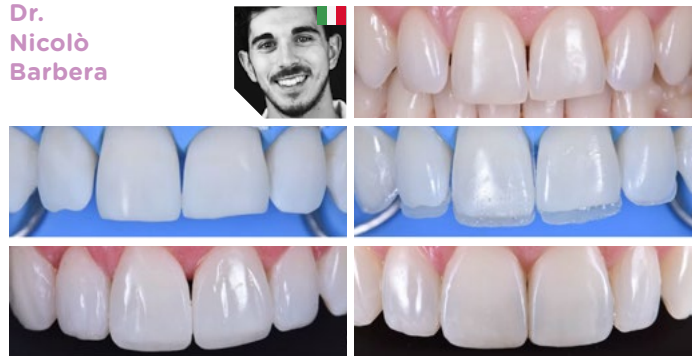

Da più di 10 anni
la tecnologia vincente.

DA
DENTAL
ADVISOR



2010 / 2024 TOP AWARD COMPOSITE



Packaging disponibili

Estelite Sigma Quick Intro Kit

- 6 siringhe Estelite Sigma Quick da 3,8g (colori: A1, A2, A3, A3,5, OA2, OPA2)
- 1 Bond Force II Bottle da 1ml
- 50 applicatori
- 1 coppetta miscelazione
- Shade Guide



Estelite Sigma Quick 3 Syringe Kit

- 3 siringhe Estelite Sigma Quick da 3,8g (colori: A2, A3, OA3)

Ricambi

- 1 siringa
- Estelite Sigma Quick da 3,8g
- 20 capsule (PLT)
- Estelite Sigma Quick da 0,20g
- Estelite Sigma Quick Shade Guide

Classificazione colori

- Smalti



- Body



- Masse Effetto



- Dentine



Tips and tricks

Usa l'OPA2 nelle III e IV classi come primo strato.


Lo sai che l'OPA2 può essere usato anche con Estelite Asteria?

Sol-Gel Method


DAL 1981

Il riempitivo sferico di dimensioni Supra-Nano per risultati semplici, duraturi e meravigliosi.

COPIARE È FACILE,
INNOVARE È TOKUYAMA.

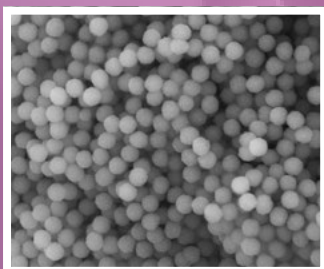

ESTELITE
SIGMA QUICK
20.000X

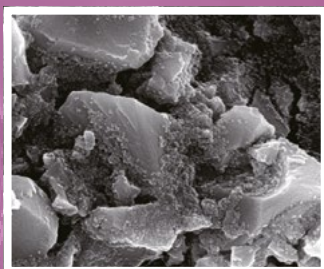

GAENIAL «GC»^{*}
20.000X

^{*} Non è un marchio registrato Tokuyama Dental Corporation

Tokuyama, grazie al brevetto Sol-Gel Method, riesce a determinare in laboratorio forma e dimensione dei suoi riempitivi a base di SiO_2 e ZrO_2 (ossido di silice e zirconio), dando vita a un riempitivo realmente sferico chiamato Supra Nano Spherical Filler.

Si tratta di un composto realizzato grazie a una reazione chimica di alcossidi metallici. Grazie a questo metodo le dimensioni molecolari Supra-Nano conferiscono al materiale caratteristiche che permettono di ottenere restauri dalle superfici molto levigate e della massima brillantezza finale.



UN BREVETTO ESCLUSIVO
TOKUYAMA DENTAL DAL 1981

 **Tokuyama**
Innovating Tomorrow's Dentistry, Today.

Tokuyama Dental Italy srl
tel. +39 0444 659650
fax +39 0444 750345
info@tokuyama.it

 **Umbra**
THE DENTAL PARTNER

Distributore esclusivo
tel. +39 075 5069040
fax +39 075 5019861
team.mkt@umbra.it



www.tokuyama.it